



**HOTEL
SPA**
www.hotel-spa.it

SPA
DREN
5.0

Presso-massaggio



LA NUOVA APPARECCHIATURA PER **PRESSO-MASSAGGIO** STUDIATA PER IL MERCATO DELL'ESTETICA PROFESSIONALE

Come funziona la tecnologia


SPA DREN, elaborando le informazioni raccolte per ogni cliente, formula programmi personalizzati specifici per il tipo di inestetismo da trattare.

La tecnologia SPA DREN, grazie all'azione combinata di diversi fattori, riproduce più tipologie di massaggio.

Il dispositivo è dotato di 20 programmi, che variano in base alle combinazioni delle diverse pressioni, dei tempi e dell'alternanza del gonfiaggio dei settori al fine di simulare vari tipi di massaggio. Questo sistema facilita l'uso della tecnologia anche a operatori poco esperti.

SPA DREN agisce per migliorare il circolo linfatico e favorire il drenaggio di liquidi e scorie. Attraverso la pre-impostazione di parametri, quali pressione, tempo di gonfiaggio-sgonfiaggio e durata del trattamento, si può scegliere la tipologia di trattamento mirata all'inestetismo da trattare.

Nell'uso di questa tecnologia, nel caso l'operatore lo desideri, si possono modificare le pressioni dei diversi settori durante il trattamento, senza per questo compromettere la sicurezza dello stesso. Ovviamente, l'aumento delle pressioni dei diversi settori commisurato alle esigenze del cliente, può arrivare a un massimo calcolato in base alla pressione minima o diastolica (5% in meno rispetto alla minima).

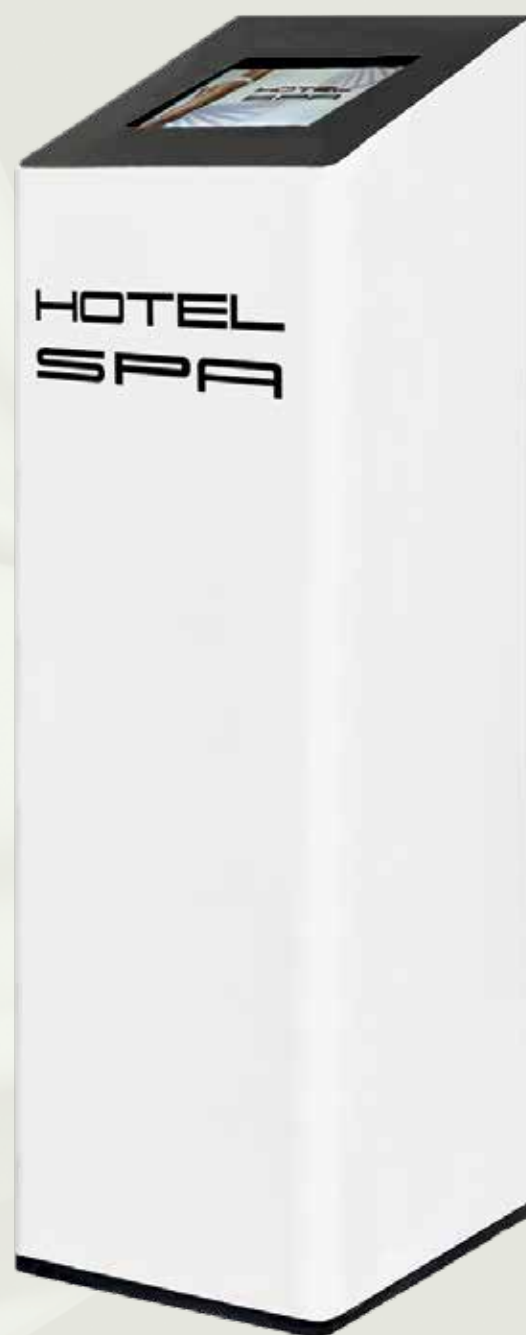

LA RITENZIONE IDRICA È ACQUA PASSATA

SPA DREN è dotato di un apposito marsupio da posizionare sul lettino per contenere le parti gonfiabili quando l'apparecchiatura non è in funzione.

La chiusura "velcro" consente una perfetta regolazione sugli arti, anche in soggetti di stature e peso diversi.



Pulsante di emergenza

4x

4 volte più veloce al fine di effettuare diversi cicli nella seduta

2x

2 volte più silenziosa

6x

Risultati nettamente superiori alla norma

SFIGMOMANOMETRO

Il dispositivo è dotato di sfigmomanometro per formulare programmi personalizzati specifici in base alla pressione arteriosa



SEMPLICITÀ DI UTILIZZO E DI PERSONALIZZAZIONE, **CON RISULTATI ECCELLENTI**

La pressoterapia SPA DREN è molto semplice da utilizzare.

Una volta impostato il programma più idoneo per la cliente, selezionato tra i 20 preimpostati (è possibile anche effettuarne di personalizzati) basterà regolare il tempo di seduta, normalmente 25 minuti, e avvolgere la cliente con i gambali dalla pianta del piede fino a sotto il seno. Fatto ciò si è pronti per effettuare la seduta.

Il trattamento porta ad un risultato immediato ed è molto piacevole per chi vi si sottopone. Per potenziarne i risultati è possibile applicare cosmetici, fanghi o bendaggi specifici.


Normalmente si effettua un ciclo di 10 sedute, calcolando incontri 2 volte a settimana. L'abbonamento mensile resta sempre un'ottima soluzione per queste tipologie di trattamenti. Grazie infatti al ridotto costo di utilizzo, SPA DREN, è un trattamento adatto all'applicazione frequente, al richiamo della clientela e ad essere inserita con molteplici trattamenti corpo.

Non necessita di operatore durante la seduta.

I RISULTATI ATTESI DOPO IL TRATTAMENTO DI PRESSOTERAPIA

I risultati sono visibili e misurabili fin dai primi trattamenti. Già dalla prima seduta, infatti, le gambe appaiono più sgonfie e leggere. Con un ciclo di pressoterapia i benefici sono molteplici. Il giro vita e le circonferenze calano in quanto tutto il corpo tende a sgonfiarsi. Questo trattamento è particolarmente indicato a chi fa vita sedentaria e trascorre molte ore in piedi.

Certamente si può dire che sia opportuno per 9 donne su 10.

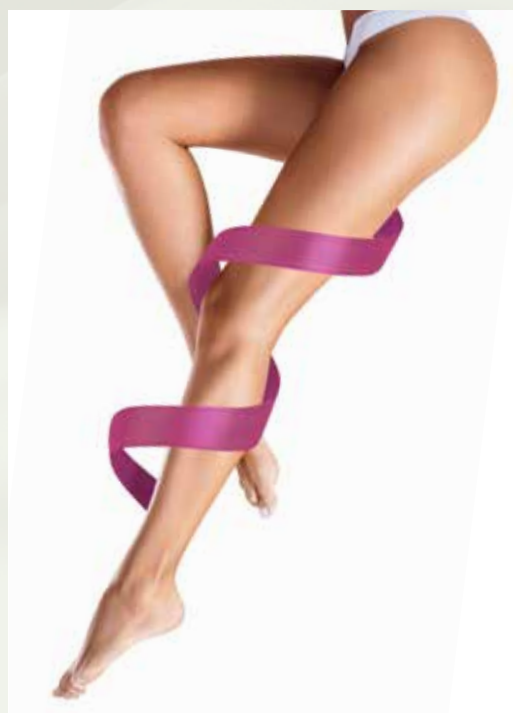

CORSETTERIA

- 2 stivaletti a 2 settori indipendenti
- 2 gambali a 4 settori indipendenti
- 2 fasce regolabili a 2 settori indipendenti per il trattamento di fianchi e glutei



INFORMAZIONI PRATICHE



Riduzione degli edemi
localizzati e diffusi



Miglioramento
micro-circolo periferico



Defaticamento delle
gambe

SPA DREN - SPECIFICHE TECNICHE

Tensione ingresso

v 230

Frequenza ingresso

Hz 50

Fusibili

2x2A L/250 5x20

Potenza assorbita

w 250

Dimensioni dispositivo

cm 50x40x20

Classe di sicurezza

I / BF

Temperatura di funzionamento

o c 5+40

Temperatura di immagazzinamento

o c 0+50

Pressione minima di funzionamento

mmHg 1

Numero di programmi

20

Numero di canali

8

Pressione massima difunzionamento

mmHg 100

Tempo massimo di Trattamento

minuti 99

Una proposta esclusiva su
acquisto-noleggio-leasing
con dilazione del pagamento
fino a 36 mesi

La soluzione HOTEL SPA include:

- Trasporto e installazione
- Formazione in loco
- 200 Flyer

#centriamoiltuocentro

**HOTEL
SPA**

☎ 051 90 43 03

✉ servizioclienti@hotel-spa.it

🌐 www.hotel-spa.it